


Minivette® POCT

Aufnahme und direkte Abgabe kleiner Kapillarovollblutproben für Point-of-Care-Tests




Minivette® POCT


- Einfache Probengewinnung dank optimaler Kapillareigenschaften
- Präzise Abgabe kleiner Vollblutproben
- Kein Abtropfen bei der Übertragung auf die Testkarte
- Verfügbar in den Volumina 10 µl, 20 µl, 50 µl, 100 µl und 200 µl
- Präparierungen: Neutral, Heparin und EDTA

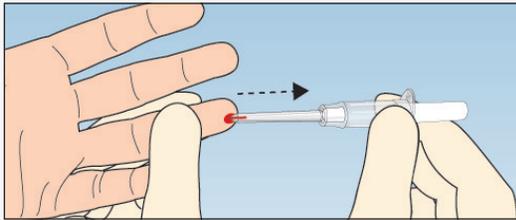


1 Die Minivette® POCT wird seitlich unterhalb der Halteflügel gefasst und in einer horizontalen oder leicht geneigten Position gehalten. Bei der Aufnahme der Blutropfen mit der Kapillarspitze darf das Belüftungsloch am Stempelende nicht verschlossen sein. Den Stempel nicht eindrücken und die Kapillare luftblasenfrei befüllen.

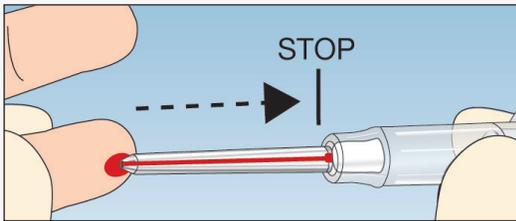

2 Die Blutentnahme endet automatisch, wenn die Kapillare bis zum weißen Sperrfilter mit Blut befüllt ist.

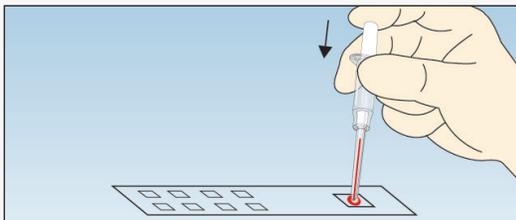

3a Die Kapillarspitze auf das Testfeld aufsetzen und durch saches Drücken des Stempels vollständig auf die Testkarte abgeben.

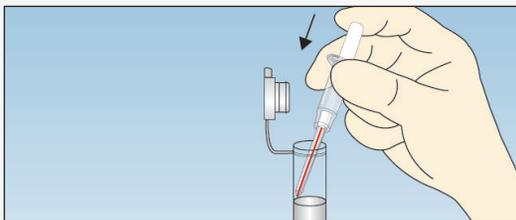

3b Alternativ kann die Probe in ein Mikroprobengefäß abgegeben werden.

Alle Blutproben von Patienten als potentiell infektiös behandeln. Handschuhe tragen!

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung		Farbcode	Verpackung
17.2111.010	Minivette® POCT	10 µl neutral	weiß	200 St./Innenkarton / 2.000 St./Karton
17.2111.020	Minivette® POCT	20 µl neutral	weiß	
17.2111.050	Minivette® POCT	50 µl neutral	weiß	
17.2111.100	Minivette® POCT	100 µl neutral	weiß	
17.2111.200	Minivette® POCT	200 µl neutral	weiß	150 St./Innenkarton / 1.500 St./Karton
17.2112.020	Minivette® POCT	20 µl Lithium Heparin	orange	200 St./Innenkarton / 2.000 St./Karton
17.2112.120	Minivette® POCT	20 µl Lithium Heparin	grün	
17.2112.050	Minivette® POCT	50 µl Lithium Heparin	orange	
17.2112.150	Minivette® POCT	50 µl Lithium Heparin	grün	
17.2112.100	Minivette® POCT	100 µl Lithium Heparin	orange	
17.2112.101	Minivette® POCT	100 µl Lithium Heparin	grün	
17.2112.200	Minivette® POCT	200 µl Lithium Heparin	orange	150 St./Innenkarton / 1.500 St./Karton
17.2112.201	Minivette® POCT	200 µl Lithium Heparin	grün	
17.2113.020	Minivette® POCT	20 µl EDTA	rot	200 St./Innenkarton / 2.000 St./Karton
17.2113.120	Minivette® POCT	20 µl EDTA	violett	
17.2113.050	Minivette® POCT	50 µl EDTA	rot	
17.2113.150	Minivette® POCT	50 µl EDTA	violett	
17.2113.201	Minivette® POCT	200 µl EDTA	violett	150 St./Innenkarton / 1.500 St./Karton

SARSTEDT AG & Co.
 Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
 Telefon (+49) 0 22 93 30 50
 Telefax (+49) 0 22 93 305-3450
☎ Service 0800 (Deutschland)
 Telefon (0800) 0 83 30 50
 info@sarstedt.com
 www.sarstedt.com