

Lancetas de Segurança - A nova geração

Para uma punção segura, confortável e delicada



Segurança para o usuário e o paciente

- A agulha e lâmina estão ocultas com segurança no corpo da lanceta, antes e depois da utilização
- O bloqueio automático elimina a chance de ferimentos por picada de agulha e contaminações cruzadas
- Produto estéril e descartável, não podendo ser reutilizado


Manuseio simples

- O sistema já vem preparado e é fácil de usar
- O botão de disparo protegido evita a ativação e desativação acidental
- Com corpo rugoso e achatado, a lanceta de segurança pode ser usada com segurança
- A pequena área de contato permite uma punção exata no local desejado

Conforto para o paciente

- Para reduzir o desconforto do paciente, as lâminas siliconizadas ultra-afiadas e as pontas das agulhas triplamenteafiadas minimizam a dor.
- A profundidade controlada de penetração elimina o risco de lesão óssea

Lanceta de Segurança - A nova geração

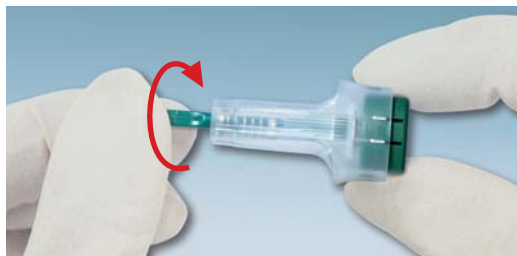

1 Gire a tampa de proteção.



2 Apoie a lanceta de segurança no local da punção selecionado e desinfetado. Pressione o botão de disparo.



3 Descarte a lanceta de segurança em um recipiente adequado.

Informações para pedidos

Código	Descrição	Tipo e tamanho	Profundidade de penetração	Embalagem
85.1015	Lanceta de segurança Mini	28 G	1,6 mm	200/embalagem interna, 1.200/embalagem externa
85.1016	Lanceta de segurança Normal	21 G	1,8 mm	200/embalagem interna, 1.200/embalagem externa
85.1017	Lanceta de segurança Extra	18 G	1,8 mm	200/embalagem interna, 1.200/embalagem externa
85.1018	Lanceta de segurança Super	Lâmina 1,5 mm,	1,6 mm	200/embalagem interna, 1.200/embalagem externa
85.1019 (Para calcanhar de bebês)	Lanceta de segurança Neonatal	Lâmina 1,5 mm,	1,2 mm	200/embalagem interna, 1.200/embalagem externa

Os tubos Microvette® para coleta de sangue capilar completam nossa linha de produtos



Microvette® 100/200
Coleta de sangue com o capilar end-to-end



Microvette® 300/500
Coleta de sangue usando o aro do tubo

Teremos prazer em enviar mais material informativo sobre o assunto.

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNAIBA - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**