

# NFT

## Sistema de coleta de urina

Coleta de amostras com operação por amostragem higienicamente fechada e sem agulha



**SARSTEDT**

# NFT Transferência sem agulha

Pré-análise  
de urina  
2.0

O primeiro sistema de coleta de urina da SARSTEDT para realização de amostragens higienicamente fechada e sem agulha

## Higiênico. Prático. Seguro.

Como tornar a coleta de amostras de urina ainda mais segura, higiênica e simples? Os produtos inovadores do sistema NFT trazem a resposta a esta pergunta. Como o primeiro sistema de coleta de urina fechado e sem agulha da SARSTEDT, a nova família de produtos combina as vantagens dos produtos existentes em uma solução.


## Novos padrões para pré-análise de urina



- Disponível como um coletor de urina NFT e também como um frasco de 3 litros NFT para coleta de urina de 24 horas
- Sistema de coleta sem metal e sem agulha
- Armazenamento e transporte seguros
- Transferência de urina simples e higiênica com o Monovette® para urina
- Não é necessário o uso de descartadores de perfurocortantes para o descarte de produtos NFT

### Simplesmente prático

O Monovette® para urina permite a Coleta higiênica de urina e também é apropriado para uso como tubo primário de análise para tiras de teste e analisadores assim como pode ser centrifugado para coleta de sedimentos.

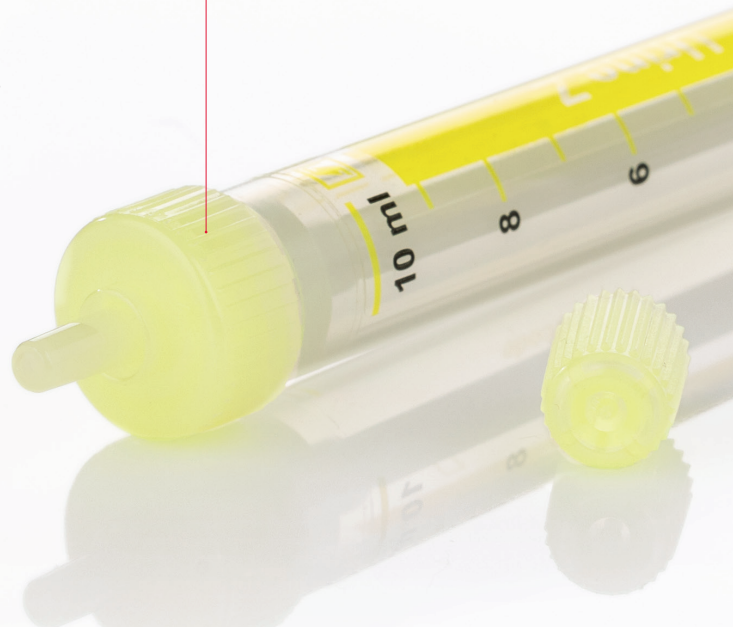




## Novo

Com a nova função de retirada sem agulha, as cânulas não são mais necessárias. A Monovette® para urina penetra facilmente a inovadora membrana NFT.


Após a fácil coleta de amostras, o acesso é vedado novamente de forma firme e higiênica, mesmo após várias coletas.

Não há risco de infecção por ferimentos com agulhas.

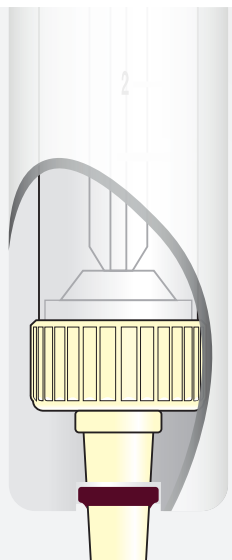

# CONVINCENTE

- ✓ **Risco minimizado de lesões e mais segurança na aplicação** para funcionários e pacientes através de uma obtenção de amostras sem agulhas
- ✓ **Economia no descarte**, pois os componentes do sistema NFT não precisam ser descartados separadamente

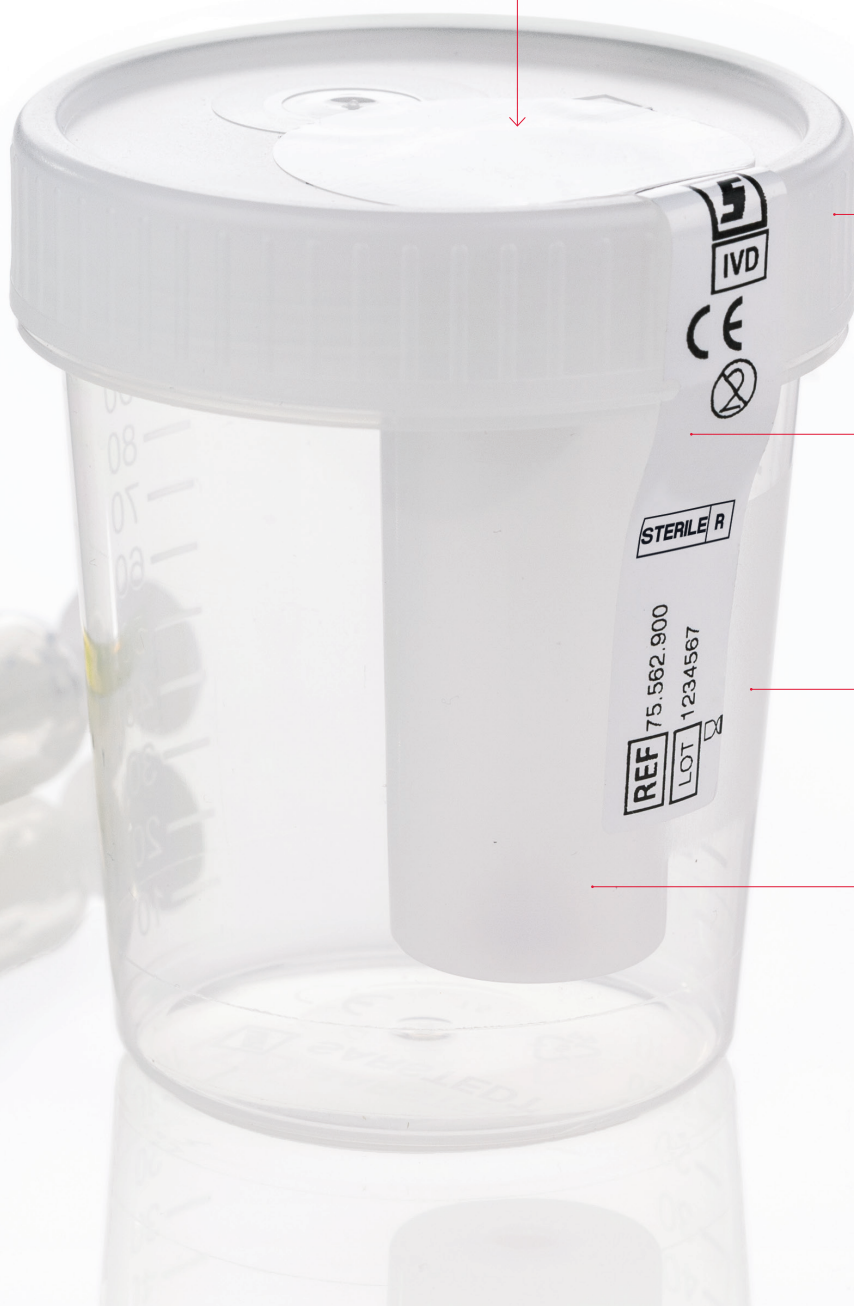

### Estanque a líquidos e odor

Tampa rosqueada com unidade de transferência

### Selado

A etiqueta de segurança indica a esterilidade interna do coletor de urina NFT se estiver intacto

### Tudo claro

Recipiente altamente transparente feito de polipropileno (PP) robusto para uma boa avaliação visual

### Inovador

Unidade de transferência sem agulha com membrana NFT perfurável

# NFT

## Sistema de Coleta de Urina

O melhor dos diversos sistemas

O sistema NFT com Monovette® para urina, coletor de urina NFT e frasco de coleta de urina NFT garante condições de trabalho higiênicas durante todo o processo de coleta de amostras:

- Com o Monovette® para urina e a ponta de sucção incluída, você pode realizar o processo de coleta sem agulha, mesmo com uma quantidade muito pequena para preenchimento. Não é necessária uma unidade de transferência separada, como nos sistemas de vácuo.
- O manuseio intuitivo pode ser aprendido rapidamente e sem muito treinamento.
- Com o Monovette® para urina, o processo de coleta pode ser repetido, se necessário, graças ao princípio de aspiração. Não há risco de perda de função devido a um uso incorreto.
- Graças à sofisticada função de remoção sem agulha, o risco de lesões para funcionários e pacientes é minimizado.
- Após a remoção, os produtos do sistema NFT não precisam ser descartados separadamente. Isso poupa tempo e dinheiro em comparação com produtos com cânula integrada.

### Bem pensado

O frasco coletor de urina NFT com volume de 3.000 mL, alça ergonômica, grande diâmetro de abertura e janela de visualização transparente graduada em incrementos de 100 mL



## Monovette® para urina – trabalho higiênico em apenas algumas etapas

- O Monovette® permite a coleta de amostras higiênica e sem agulhas a partir de recipientes para coleta de urina ou sistemas de drenagem de urina.
- Uma análise de urina com tiras de teste disponíveis comercialmente pode ser realizada diretamente no Monovette® para urina parcialmente preenchido.
- O Monovette® para urina é adequado para transporte e expedição de acordo com o regulamento para embalagens P650 do ADR e IATA. Ele pode ser usado na centrífuga e em analisadores para extrair sedimentos.



## Manuseio fácil: Coletor de urina NFT



## Conveniente para coleta de urina de 24 horas: Frasco de coleta de urina NFT



Mesmo com o frasco de coleta de urina NFT de grande volume, a amostragem permanece limpa graças à função de amostragem fechada.



Confira o tutorial para facilitar o manuseio dos produtos NFT:  
[sarstedt.com/nft-tu-br](http://sarstedt.com/nft-tu-br)

# PEÇA UMA AMOSTRA GRATUITA DO PRODUTO



[sarstedt.com/nft-sa-br](http://sarstedt.com/nft-sa-br)



## A SARSTEDT estabelece novos padrões com o sistema de coleta de urina NFT

Apenas uma coleta de amostra limpa e precisa pode garantir resultados de análise corretos. Os produtos do sistema NFT da SARSTEDT estabelecem o padrão para pré-análises precisas adequadas para o uso rotineiro, combinadas com a máxima segurança para usuários e pacientes.



Os produtos NFT não precisam ser descartados separadamente.

## Fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia de sistemas coordenados.

Descubra as soluções de 360° para seus sistemas pré-analíticos da SARSTEDT



[sarstedt.com/nft-wf-br](http://sarstedt.com/nft-wf-br)



**SARSTEDT**



## Coletor de urina NFT 100 mL

| Número do pedido | Volume | C x Ø      | Modelo   | Pureza  | Embalagem (caixa interna/caixa externa) |
|------------------|--------|------------|--|---------|---|
| 75.562.900       | 100 ml | 72 x 62 mm | com etiqueta de segurança e unidade de transferência | estéril | 200 / 200                               |

## Frasco coletor de urina NFT 3,0 L

| Número do pedido | Volume  | C x L x A          | Modelo  | Pureza | Embalagem (caixa interna/caixa externa) |
|------------------|---------|--------------------|---|--------|---|
| 77.575.900       | 3000 ml | 125 x 130 x 246 mm | com unidade de transferência e etiqueta do paciente, diâmetro de abertura 80 mm | -      | 30 / 30                                 |

## Monovette® Z para urina - sem preparação

| Número do pedido | Volume | C x Ø       | Modelo (amarelo)   | Pureza  | Embalagem (caixa interna/caixa externa) |
|------------------|--------|-------------|--|---------|---|
| 10.250.001       | 3,2 ml | 75 x 13 mm  | Etiqueta de papel, gravável                              | -       | 64 / 512                                |
| 10.258           | 8,5 ml | 92 x 15 mm  | Etiqueta plástica, transparente                          | -       | 64 / 512                                |
| 10.258.001       | 8,5 ml | 92 x 15 mm  | Etiqueta de papel, gravável                              | -       | 64 / 512                                |
| 10.258.020       | 8,5 ml | 92 x 15 mm  | Etiqueta plástica, transparente, individual na embalagem | estéril | 100 / 500                               |
| 10.252           | 10 ml  | 102 x 15 mm | Etiqueta plástica, transparente                          | -       | 64 / 512                                |
| 10.252.001       | 10 ml  | 102 x 15 mm | Etiqueta de papel, gravável                              | -       | 64 / 512                                |
| 10.252.020       | 10 ml  | 102 x 15 mm | Etiqueta plástica, transparente, individual na embalagem | estéril | 100 / 500                               |
| 10.252.030       | 10 ml  | 102 x 15 mm | Etiqueta plástica, transparente, com proteção contra luz | -       | 64 / 512                                |

## Monovette® para urina - ácido bórico: com estabilizador para testes microbiológicos

| Número do pedido | Volume | C x Ø       | Modelo (verde)   | Pureza  | Embalagem (caixa interna/caixa externa) |
|------------------|--------|-------------|--|---------|---|
| 10.256.001       | 3,2 ml | 75 x 13 mm  | Etiqueta de papel, gravável                              | -       | 64 / 512                                |
| 10.256.021       | 3,2 ml | 75 x 13 mm  | Etiqueta de papel, gravável, individual na embalagem     | estéril | 100 / 500                               |
| 10.260.001*      | 8,5 ml | 92 x 15 mm  | Etiqueta de papel, gravável                              | -       | 64 / 512                                |
| 10.260.021*      | 8,5 ml | 92 x 15 mm  | Etiqueta de papel, gravável, individual na embalagem     | estéril | 100 / 500                               |
| 10.253           | 10 ml  | 102 x 15 mm | Etiqueta plástica, transparente                          | -       | 64 / 512                                |
| 10.253.001       | 10 ml  | 102 x 15 mm | Etiqueta de papel, gravável                              | -       | 64 / 512                                |
| 10.253.020       | 10 ml  | 102 x 15 mm | Etiqueta plástica, transparente, individual na embalagem | estéril | 100 / 500                               |
| 10.253.021       | 10 ml  | 102 x 15 mm | Etiqueta de papel, gravável, individual na embalagem     | estéril | 100 / 500                               |

Outros consumíveis para pré-análise de urina podem ser encontrados em [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

\*Novo lançamento planejado 2. Trimestre de 2024

## SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126

Avecuia

CEP 18546-412

Porto Feliz – SP

Tel.: +55 11 4152 2233

[info.br@sarstedt.com](mailto:info.br@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Mais informações, vídeos  
e amostras de pedidos:  
[sarstedt.com/nft-br](http://sarstedt.com/nft-br)

Em caso de dúvidas:  
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site: [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)